

HELIX® GRAND MORSE®

VERSATILIDAD INSUPERABLE

Aumente la flexibilidad de tratamiento de sus pacientes con el fin de obtener los mejores resultados posibles de sustitución dental para todas las indicaciones, desde unitarias hasta totalmente edéntulas. Helix® Grand Morse® permite personalizar las opciones de tratamiento según cada situación clínica específica, teniendo en cuenta los principios biológicos y respetando los fundamentos de la implantología.

GRAN FIABILIDAD

BASE ESTABLE Y SÓLIDA DISEÑADA PARA EL ÉXITO A LARGO PLAZO

Esta interfaz implante-pilar es crucial para un resultado estético y funcional satisfactorio a largo plazo. La conexión Grand Morse® de Neodent® ofrece una combinación única basada en conceptos demostrados: un cambio de plataforma asociado con un cono Morse profundo de 16°, con indexación interna incluida para lograr una conexión sólida y estable diseñada para obtener resultados duraderos.



- 1 Platform Switching**
Diseño del pilar con un diámetro más estrecho que el área coronal del implante, lo que permite el concepto de cambio de plataforma⁽¹⁻⁵⁾.
- 2 Indexación interna**
Colocación precisa del pilar, protección frente a la rotación y manipulación sencilla.
- 3 Conexión profunda**
Permite una gran área de contacto entre el pilar y el implante para una distribución óptima de las cargas.
- 4 Conexión cono Morse de 16°**
Diseñada para garantizar un ajuste preciso para un sellado óptimo de la conexión.

GRAN ESTÉTICA

OFRECE UNA ESTÉTICA NATURAL INMEDIATA

Hoy en día, los pacientes esperan tener unos tiempos de tratamiento cortos y unos resultados estéticos. La gama de restauración Grand Morse® de Neodent® ofrece flexibilidad para simplificar el tratamiento de los tejidos blandos, respetando las distancias biológicas con el fin de conseguir una función y una estética inmediatas.

SIGUIENTE NIVEL DEL TRATAMIENTO INMEDIATO DE ARCADE COMPLETA Fija

El mini pilar cónico Grand Morse® de Neodent® se ha diseñado para mejorar el tratamiento de arcada completa fija mediante la optimización del perfil de emergencia del pilar, lo cual reduce la necesidad de procedimientos invasivos.



PORTFOLIO PROTÉSICO COMPLETO PARA UNOS RESULTADOS ESTÉTICOS OPTIMIZADOS

Restauración atornillada	Restauración atornillada o cementada						Restauración cementada	Restauración atornillada	Sobredentadura	Protésis atornillada				
Pilar provisional de titanio	Pilar Pro Peak	Base de titanio	Base de titanio C	Base de titanio SA	Base de titanio para puente	Bloque de titanio	Pilar de CoCr	Pilar anatómico	Pilar universal	Pilar	Mini pilar cónico angulado	Attachment GM TW	Mini pilar cónico	Micro pilar
Provisional unitario o múltiple	Provisional unitario	Unitario	Unitario	Múltiple	Unitario o múltiple	Unitario o múltiple	Unitario	Unitario	Unitario	Unitario	Múltiple	Múltiple	Unitario o múltiple	

GRAN ESTABILIDAD

DISEÑO PARA TRATAMIENTOS INMEDIADOS PREDECIBLES EN TODOS LOS TIPOS DE HUESO

Las expectativas cada vez mayores de tratamientos de menor duración suponen un reto importante para los profesionales de la odontología. El sistema Grand Morse® de Neodent® ofrece un diseño de implante único, que cuenta con la innovadora superficie hidrofílica Acqua, pensada para maximizar la estabilidad primaria y la predictibilidad en protocolos inmediatos.

IMPLANTE ÓPTIMO DISEÑADO PARA LOGRAR UNA ELEVADA ESTABILIDAD PRIMARIA

Helix® Grand Morse® es un innovador implante híbrido diseñado para maximizar las opciones de tratamiento y eficiencia en todos los tipos de hueso.



Diseño del cuerpo completamente cónico

- Coronal: 2° - 12°
- Apical: 16°
- » Permite el subfresado

Contorno híbrido


- Coronal: cilíndrica
- Apical: cónico
- » Para lograr estabilidad con flexibilidad en la colocación vertical

Ápice activo

- Punta pequeña suave y redondeada
- Cámaras helicoidales
- » Permite la carga inmediata

SUPERFICIE HIDROFÍLICA ACQUA DISEÑADA PARA UNA ELEVADA PREDICIBILIDAD DEL TRATAMIENTO

La superficie hidrofílica Neodent® Acqua es el siguiente nivel de la extensa superficie SLA, desarrollada para lograr resultados satisfactorios incluso en situaciones complejas como, por ejemplo, en hueso blando o en protocolos inmediatos.⁽⁶⁻⁹⁾

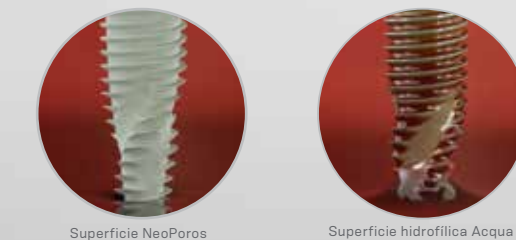

Capacidad hidrofílica:
La superficie hidrofílica presenta un ángulo de contacto más pequeño cuando entra en contacto con líquidos. Esto proporciona una mayor accesibilidad de los líquidos orgánicos a la superficie del implante Acqua.⁽¹⁰⁾

GRAN SIMPLICIDAD

MAYOR FACILIDAD DE USO

La terapia con implantes se ha convertido en una parte integral de la odontología, con un creciente número de pacientes que solicitan este tratamiento. El sistema de implantes Grand Morse® de Neodent® ofrece un diseño inteligente que proporciona eficiencia y simplicidad dentro de la red del tratamiento dental, tanto en la fase quirúrgica como en la de restauración.

UNA PLATAFORMA PROTÉSICA

Todos los implantes Grand Morse® de Neodent® cuentan con la conexión única Grand Morse® independientemente del diámetro del implante.

UN DRIVER

El driver de Neodent® permite la recogida y colocación sencillas y fiables del implante.

UN DESTORNILLADOR

El destornillador Neo tiene una conexión en estrella fiable y duradera, compatible con todos los pilares de cicatrización y tornillos de restauración Neodent® Grand Morse®.

UN KIT QUIRÚRGICO

Kit quirúrgico compacto intuitivo y funcional que permite la colocación de implantes Helix GM® en todo tipo de hueso.



